



Bedienungsanleitung



Pedasan Bärenrolle klein, ø 22x33 cm

Art.-Nr. 02315

▶▶▶ [zum Produkt...](#)

Pedalo Trainer


▶▶▶ [zur Kategorie...](#)

Anleitung

143004 Pedalo®Pedasan 22 cm

143032 Pedalo®Pedasan 32 cm

Anleitung bitte lesen und aufbewahren

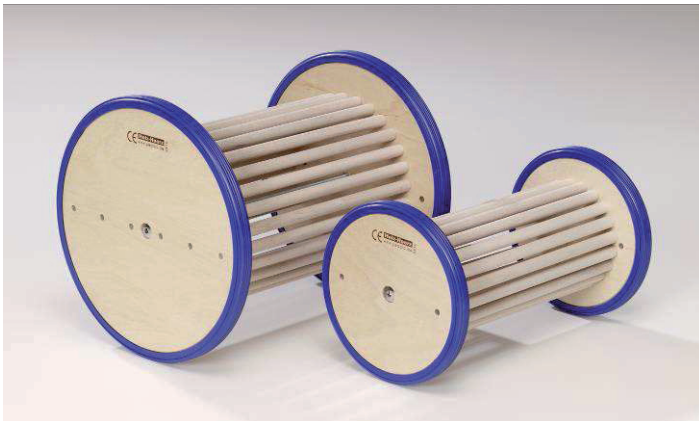

Achtung! Für die Benutzung des Gerätes wird ein gewisses Maß an motorischen Fähigkeiten und Umsicht vorausgesetzt. Im Zweifelsfall zunächst das Gerät nur mit Hilfestellung und, oder geeigneter Schutzausrüstung benutzen.

Achtung! Verpackungen sind nicht Bestandteil der Artikel und müssen vor dem Einsatz entsorgt werden. Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungszwecke. Das Gerät auf ebenem geradem Untergrund aufstellen.

Bei empfindlichen Fußböden eventuell Matte unterlegen.

Nach längerem oder häufigem Gebrauch sollten Sie alle Schrauben kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen.

Verschlissene Teile umgehend mit Original Ersatzteilen erneuern.

Gerät vor Nässe schützen.

Das Gerät ist für eine Benutzung ab einem Alter von 4 Jahren bestimmt

Die Maximale Belastbarkeit beträgt 100kg

Zubehör Artikel 556001 Haltevorrichtung





==== www.sport-tec.de ====

Sport-Tec GmbH
Physio & Fitness

Lemberger Straße 255
D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0) 6331 1480-0

Fax: +49 (0) 6331 1480-220

E-Mail: info@sport-tec.de

Web: www.sport-tec.de