



# Bedienungsanleitung



## AIRCASST Cryo/Cuff, Kanne mit Schlauch


Art.-Nr. 21950

▶▶▶ [zum Produkt...](#)

Bandagen

▶▶▶ [zur Kategorie...](#)

## Wie wird AIRCAST® CRYO/CUFF™ angewendet?

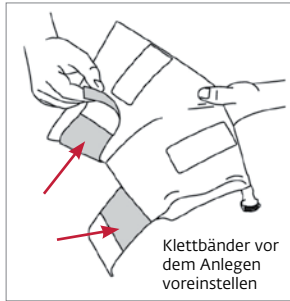

1. Schließen Sie den blauen Schlauch an die Kanne an.
2. Füllen Sie die Kanne mit einem Liter Leitungswasser und drei Litern Eis.
3. Legen Sie die Bandage an das betroffene Gelenk an.
4. Verbinden Sie die Bandage mit dem Schlauch und öffnen Sie das Luftventil an der Kanne (siehe Pfeil).
5. Wenn Sie die Kanne hochhalten, fließt das Eiswasser in die Bandage. Sobald die Bandage gefüllt ist, klippen Sie den blauen Schlauch von der Bandage ab.
6. Nach einiger Zeit erwärmt sich das Wasser in der Bandage. Schließen Sie nun den Schlauch wieder an und senken Sie die Kanne bis das erwärmte Wasser abgeflossen ist.
7. Nach ca. einer Minute ist das Wasser in der Kanne abgekühlt. Befüllen Sie nun die Bandage erneut.
8. Das Fassungsvermögen einer Kanne reicht für ca. 6–8 Stunden Kältherapie.

Bitte beachten Sie vor der Anwendung des Kältetherapie-Systems die mitgelieferte Gebrauchsanweisung.

## Welche AIRCAST® CRYO/CUFF™ Bandagen gibt es?

- Fußbandage
- Knöchelbandage
- Kniebandage
- Unterschenkelbandage
- Oberschenkelbandage
- Handbandage
- Ellbogenbandage
- Schulterbandage
- Rücken-/Hüft-/Rippenbandage

## AIRCAST® CRYO/CUFF™ Kältetherapie-System







**Sport-Tec GmbH**  
**Physio & Fitness**

Lemberger Straße 255  
D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0) 6331 1480-0  
Fax: +49 (0) 63 31 14 80-220  
E-Mail: [info@sport-tec.de](mailto:info@sport-tec.de)  
Web: [www.sport-tec.de](http://www.sport-tec.de)